

MR装置 清掃・消毒ガイド

- 使い捨ての保護手袋を着用してください
- やわらかい布巾またはガーゼでやさしく拭いてください
- 消毒用薬品拭き取り後は十分に自然乾燥させてください
- 消毒後は撮影室内の換気を十分に行ってください
- 消毒用薬品を直接装置やRFコイル等に吹きかけないでください
- 当社推奨の消毒用薬品を使用してください



推奨消毒用薬品


薬品	推奨濃度
エチルアルコール	70 %



全てのボタンをやさしく拭いてください。
誤ってボタンを押さないように注意してください。



架台全面、ボア内壁を清掃してください。
アクリル(投光器カバーやファントム)の清掃には
アルコールを使用しないでください。

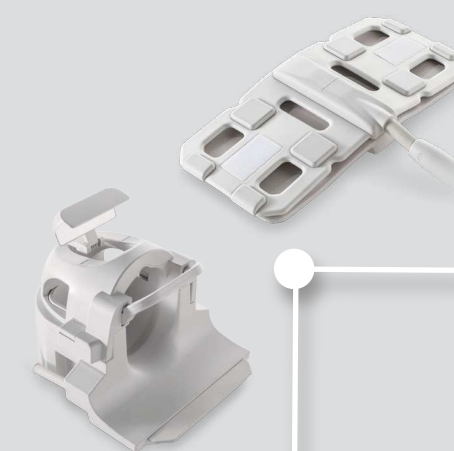


RF コイルは必ずコネクタポートから
コネクタを外して清掃してください。



RFコイル表面全体を清掃してください。
ラベルやマジックテープ等の部分にはアルコールを使用しないでください。



寝台とマットを拭いてください。
コネクタポートの清掃は行わないでください。

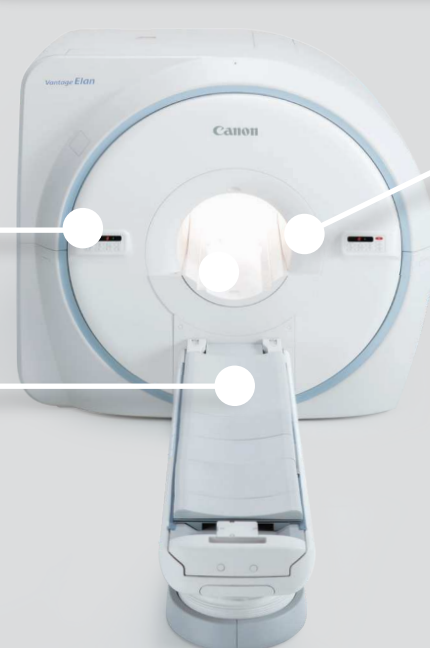

キーボードやマウス、コントロールパッドを清掃してください。
誤ってEmergencyスイッチを押さないように注意してください。