

CT装置 清掃・消毒ガイド


- 使い捨ての保護手袋を着用してください
- やわらかい布巾またはガーゼで優しく拭いてください
- 消毒用薬品を拭きとった後、乾いた布巾で乾拭きするか、表面をよく乾燥させてください
- 消毒用薬品を直接吹きかけないでください
- 当社が推奨している消毒用薬品を用いてください

推奨消毒用薬品

薬品	使用時の濃度
イソプロピルアルコール	50 ～ 70 vol %
エタノール	60 ～ 90 vol %
塩化ベンザルコニウム	0.05 ～ 0.2 %



全てのボタンを優しく拭いてください。
誤ってボタンを押さないようにしてください。

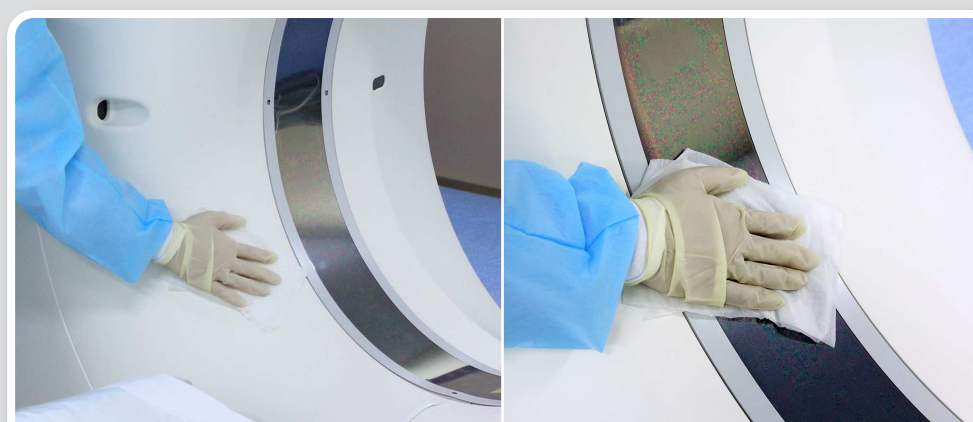

ガントリの前面・背面とマイラー部を清掃してください。



キーボードとマウスを清掃してください。
薬品を直接キーボードおよびマウスに吹きかけないでください。



寝台と寝台付属品を拭いてください。



詳細は各装置の取扱説明書をご覧ください。